



Alto Volumen

ENGRAPADORA CIRCULAR
HEMORROIDAL

Específicamente diseñada para el
tratamiento del prolapso hemorroidal
y uso en técnica S.T.A.R.R.





Diseño patentado:
Cartucho transparente, mayor
visibilidad y control sobre el
tejido capturado



2 puertos de carcasa
grandes ofrecen visibilidad
adicional al introducir
tejido en el cartucho

Yunque



La cubierta más
grande en el mercado
para una engrapadora
hemorroidal 34: 27cc

Marcas que indican la
distancia del estoma
anastomótico desde el
borde anal



Obturador



Anoscopio de
sutura de jareta



Enhebrador
de sutura



Dilatador Anal
Circular


ENGRAPADORA CIRCULAR HEMORROIDAL DE ALTO VOLUMEN



Amplia pantalla de indicador,
conveniente para un ajuste preciso
de la altura de las grapas de cierre



Perilla de cierre: fácil
de abrir y cerrar,
conveniente para la
operación

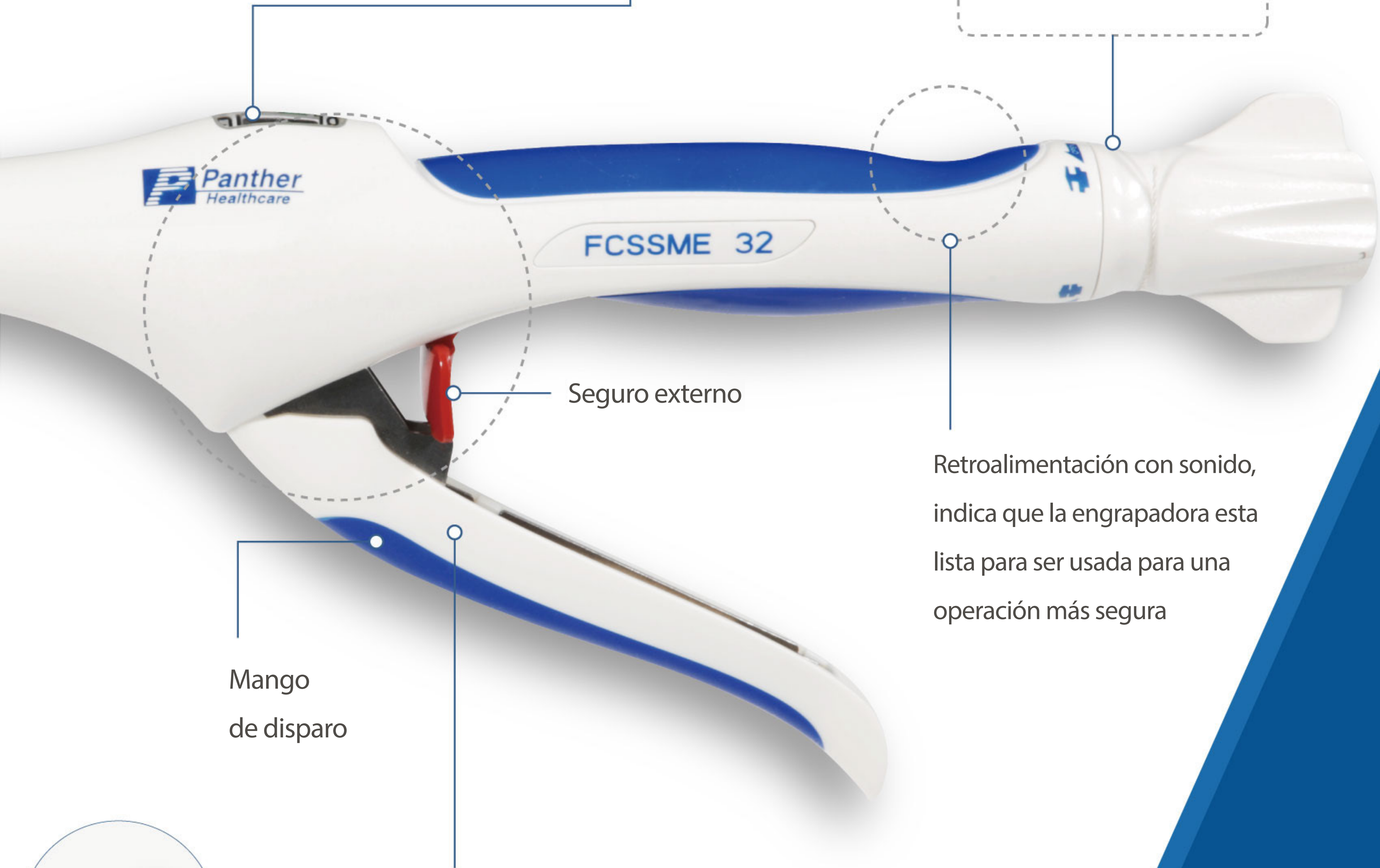

Seguro externo

Retroalimentación con sonido,
indica que la engrapadora esta
lista para ser usada para una
operación más segura

Mango
de disparo

Diseño patentado: seguridad
dual, previene activación
accidental para mayor seguridad



Dilatador Anal
Mariposa

ENGRAPADORA CIRCULAR HEMORROIDAL DE ALTO VOLUMEN



Producto	Código	Descripción
	FCSSWBE31	Engrapadora Circular Hemorroidal Desechable 31mm, seguridad dual
	FCSSWBE32	Engrapadora Circular Hemorroidal Desechable 32mm, seguridad dual
	FCSSWBE33	Engrapadora Circular Hemorroidal Desechable 33mm, seguridad dual
	FCSSWBE34	Engrapadora Circular Hemorroidal Desechable 34mm, seguridad dual
	FCSSWAE31	Engrapadora Circular Hemorroidal Desechable 31mm, seguridad dual con cartucho transparente
	FCSSWAE32	Engrapadora Circular Hemorroidal Desechable 32mm, seguridad dual con cartucho transparente
	FCSSWAE33	Engrapadora Circular Hemorroidal Desechable 33mm, seguridad dual con cartucho transparente
	FCSSWAE34	Engrapadora Circular Hemorroidal Desechable 34mm, seguridad dual con cartucho transparente
	FCSSME32	Engrapadora Circular Hemorroidal Desechable de Alto Volumen 32mm, seguridad dual con cartucho transparente y retroalimentación de sonido
	FCSSME34	Engrapadora Circular Hemorroidal Desechable de Alto Volumen 34mm, seguridad dual con cartucho transparente y retroalimentación de sonido