




Engrapadora Lineal con Cuchilla

RESECCIÓN ANTERIOR BAJA


¡Porque la
accesibilidad
importa!

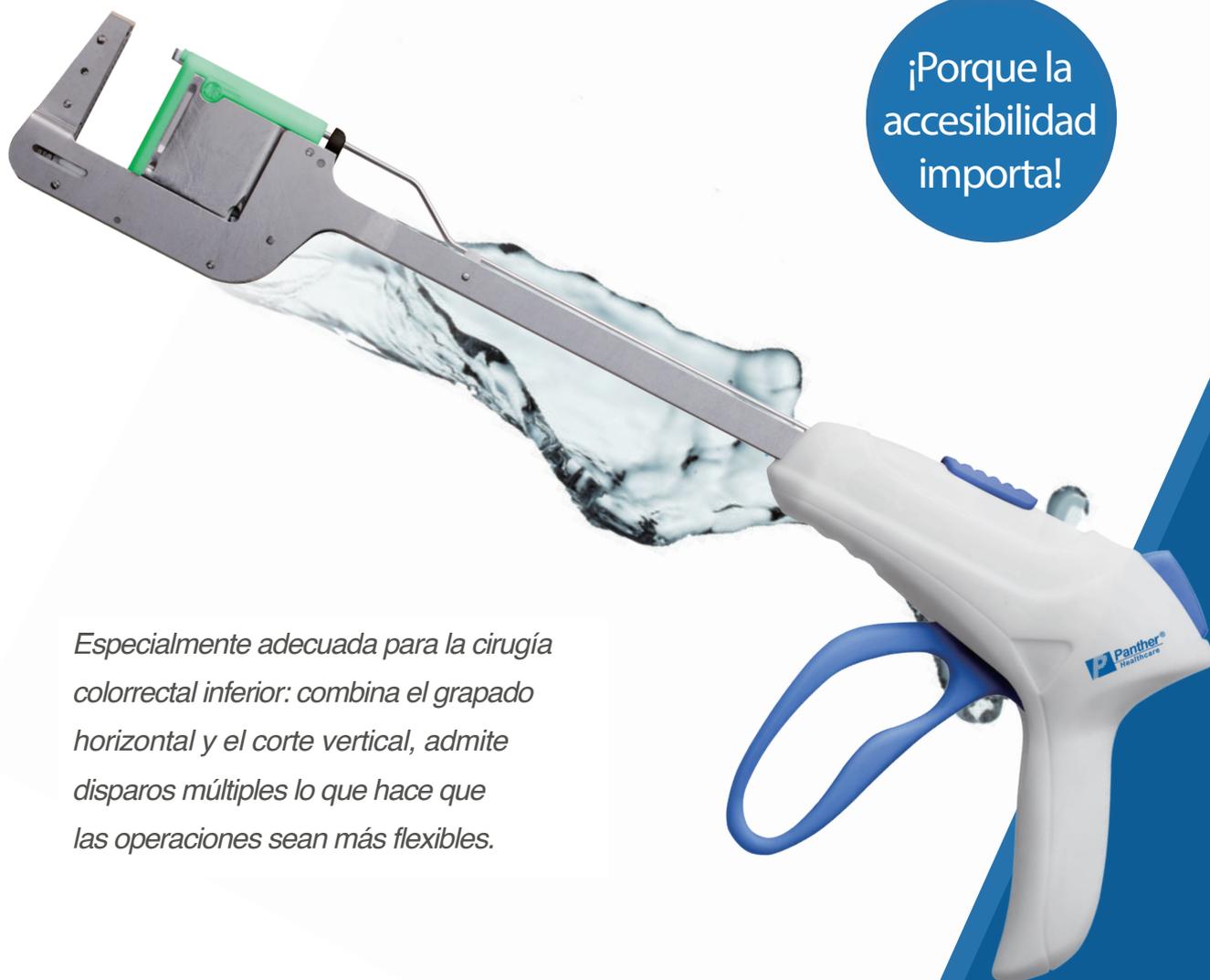

*Especialmente adecuada para la cirugía
colorrectal inferior: combina el grapado
horizontal y el corte vertical, admite
disparos múltiples lo que hace que
las operaciones sean más flexibles.*

El cabezal más pequeño y la apertura de pinza más grande del mercado.

Facilita el acceso y movilidad para colocar la engrapadora y el tejido justo donde se necesita

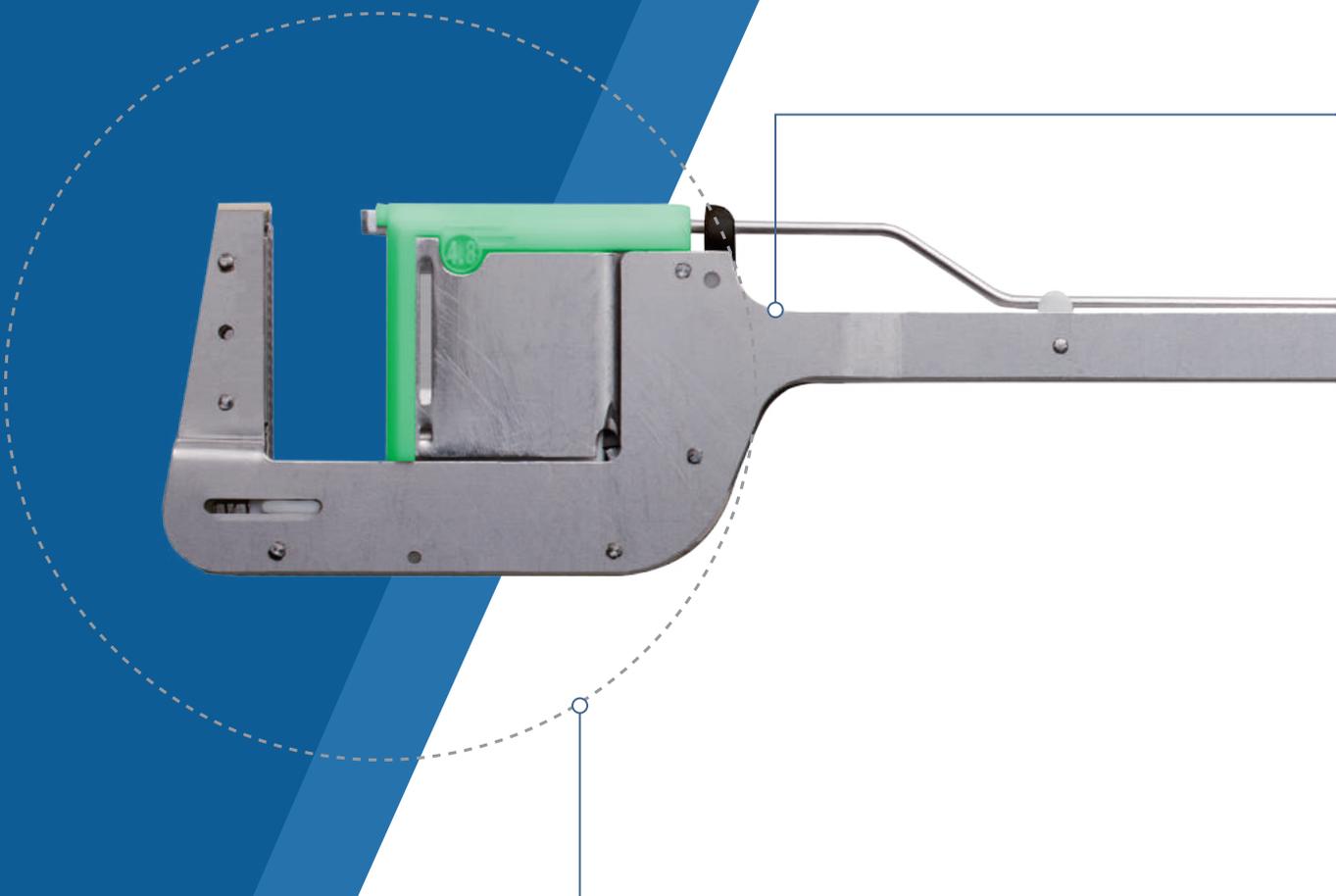


Diseño especial: con su propia cuchilla de corte, el cortar y engrapar pueden realizarse al mismo tiempo. La dirección de corte es perpendicular a la dirección de engrapado; al engrapar primero y cortar después se asegura un corte más fluido en los tejidos más gruesos.

ENGRAPADORA LINEAL CON CUCHILLA

Eje más largo que permite que el dispositivo llegue más fácilmente a la parte inferior de la pelvis para realizar una cirugía rectal baja

Borde de corte recto y línea de grapas. Línea de grapas bien formadas que garantiza una circulación sanguínea fluida

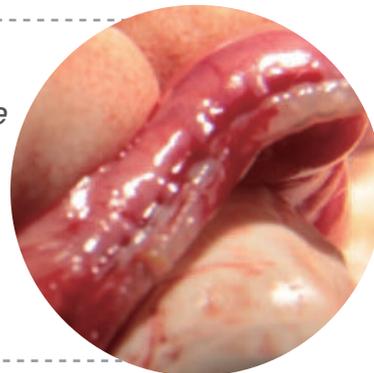

Con un diseño ergonómico, requiere menos presión en el mango

ENGRAPADORA CORTANTE DESECHABLE



Producto	Descripción	Longitud línea de grapa	Longitud línea de corte	Altura de grapa	Formación de grapa
CAAB-40	Engrapadora Lineal Cortante Desechable	43mm	40mm	4.8mm	2.0mm
CAZB-40D	Unidad de recarga para Engrapadora Lineal Cortante	43mm	40mm	4.8mm	2.0mm



¡Porque la accesibilidad importa!