

ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE
Y UNIDADES DE RECARGA



Nombre de Producto	Producto	Descripción
Engrapadora Lineal Cortante con Tecnología EG	SSAB-60 (3.8mm)	Engrapadora Lineal Cortante 60 mm con Tecnología EG y 3.8mm altura de grapa
	SSAB-60 (4.8mm)	Engrapadora Lineal Cortante 60 mm con Tecnología EG y 4.8mm altura de grapa
	SSAB-80 (3.8mm)	Engrapadora Lineal Cortante 80 mm con Tecnología EG y 3.8mm altura de grapa
	SSAB-80 (4.8mm)	Engrapadora Lineal Cortante 80 mm con Tecnología EG y 4.8mm altura de grapa
	SSAB-100 (3.8mm)	Engrapadora Lineal Cortante 100 mm con Tecnología EG y 3.8mm altura de grapa
	SSAB-100 (4.8mm)	Engrapadora Lineal Cortante 100 mm con Tecnología EG y 4.8mm altura de grapa

Recargas para Engrapadora Lineal Cortante con Tecnología EG	SADB-60N	Unidad de Recarga para Engrapadora Lineal Cortante 60 mm con Tecnología EG y 3.8 altura de grapa
	SADB-60D	Unidad de Recarga para Engrapadora Lineal Cortante 60 mm con Tecnología EG y 4.8 altura de grapa
	SADB-80N	Unidad de Recarga para Engrapadora Lineal Cortante 80 mm con Tecnología EG y 3.8 altura de grapa
	SADB-80D	Unidad de Recarga para Engrapadora Lineal Cortante 80 mm con Tecnología EG y 4.8 altura de grapa
	SADB-100N	Unidad de Recarga para Engrapadora Lineal Cortante 100 mm con Tecnología EG y 3.8 altura de grapa
	SADB-100D	Unidad de Recarga para Engrapadora Lineal Cortante 100 mm con Tecnología EG y 4.8 altura de grapa



Contáctanos:
(664) 135 9207
bajawoundcare@gmail.com




Engrapadora Lineal
Cortante con Tecnología EG



Baja Wound Care




SSAB ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE

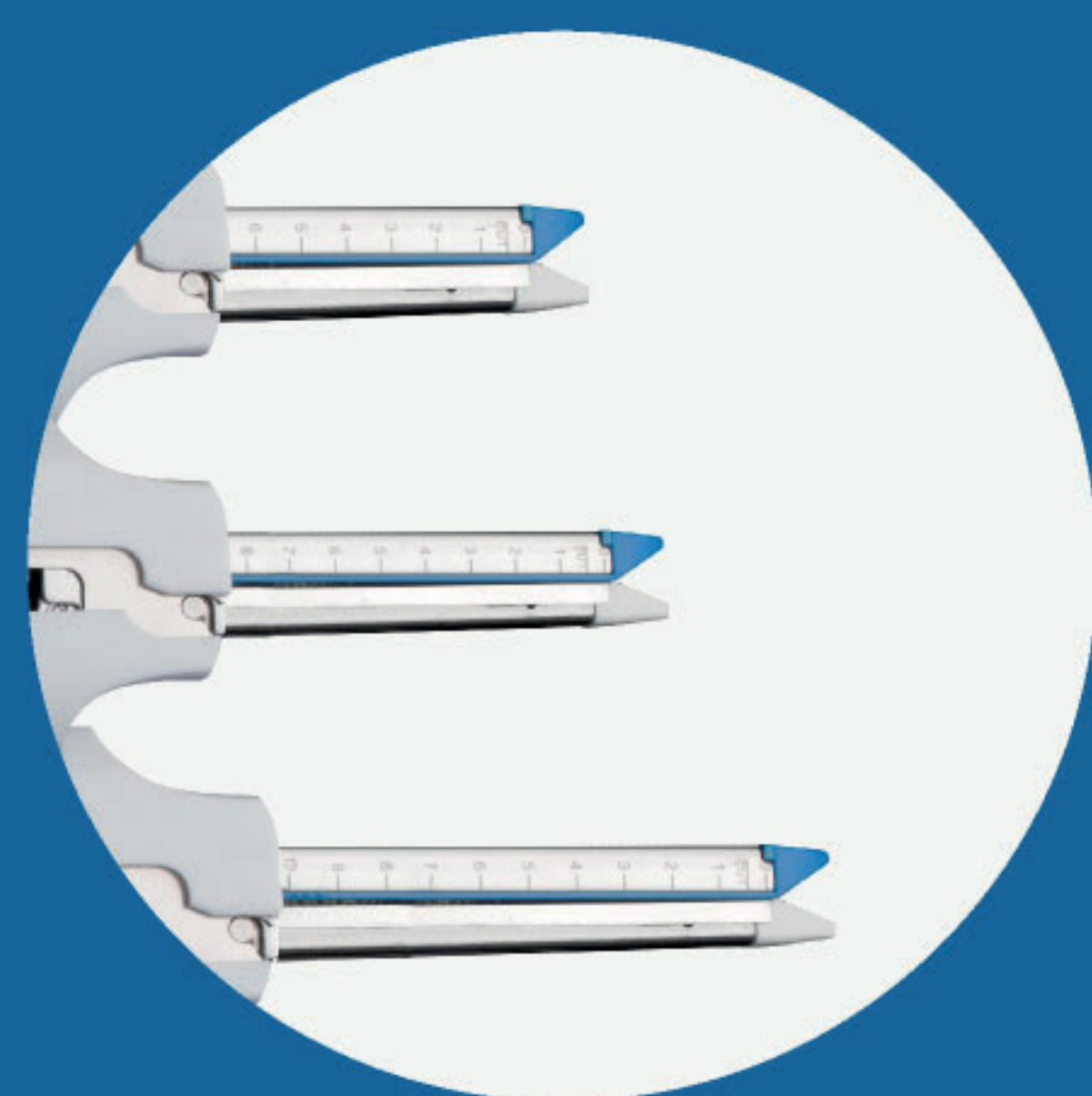

Tres diferentes unidades de recarga de longitudes diversas para la engrapadora lineal, 60mm, 80mm y 100mm, diseñadas para los diversos tejidos




Diseño de bloqueo de manija, se puede usar con una sola mano

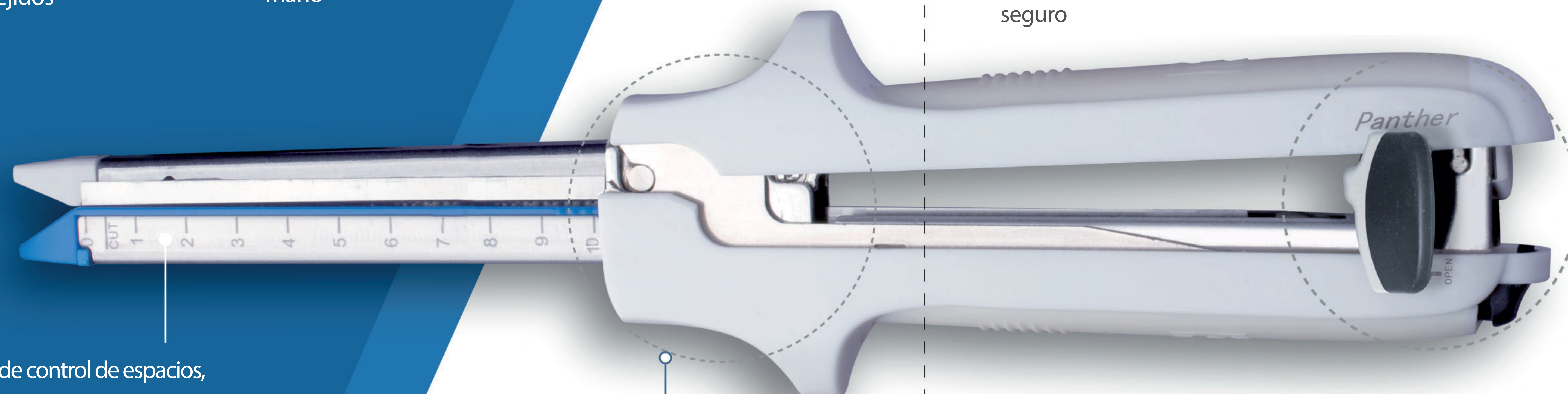

Sistema de control de espacios, asegura la perfecta formación en forma de B de la grapa desde el extremo proximal hasta el distal



Protector de cuchilla y bloqueo de seguridad del cartucho: El protector de plástico blanco cubre la cuchilla antes y después de la activación de la unidad de recarga, previniendo que el cirujano o el asistente sufran lesiones con la cuchilla de la unidad de recarga. Cuchilla desechable auténtica, asegura un corte efectivo, reduce el daño en el tejido y evita la contaminación cruzada

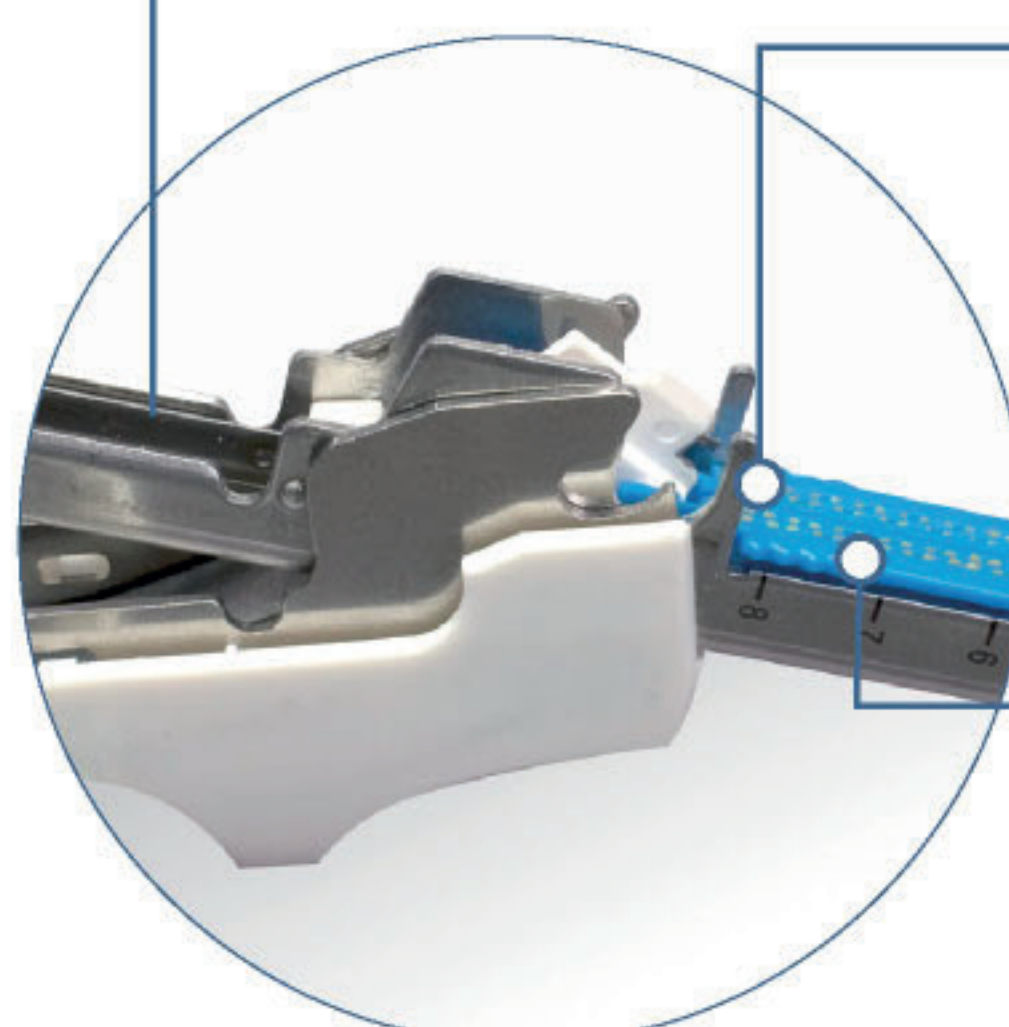


Cuchilla nueva con cada cartucho: garantiza un corte efectivo, reduce el trauma en el tejido, evita la contaminación cruzada




Diseño de unidad de recarga flotante: La unidad de recarga flota por encima del borde de la orquilla antes de cerrar por completo la engrapadora, evita falsas activaciones

Panther SSAB

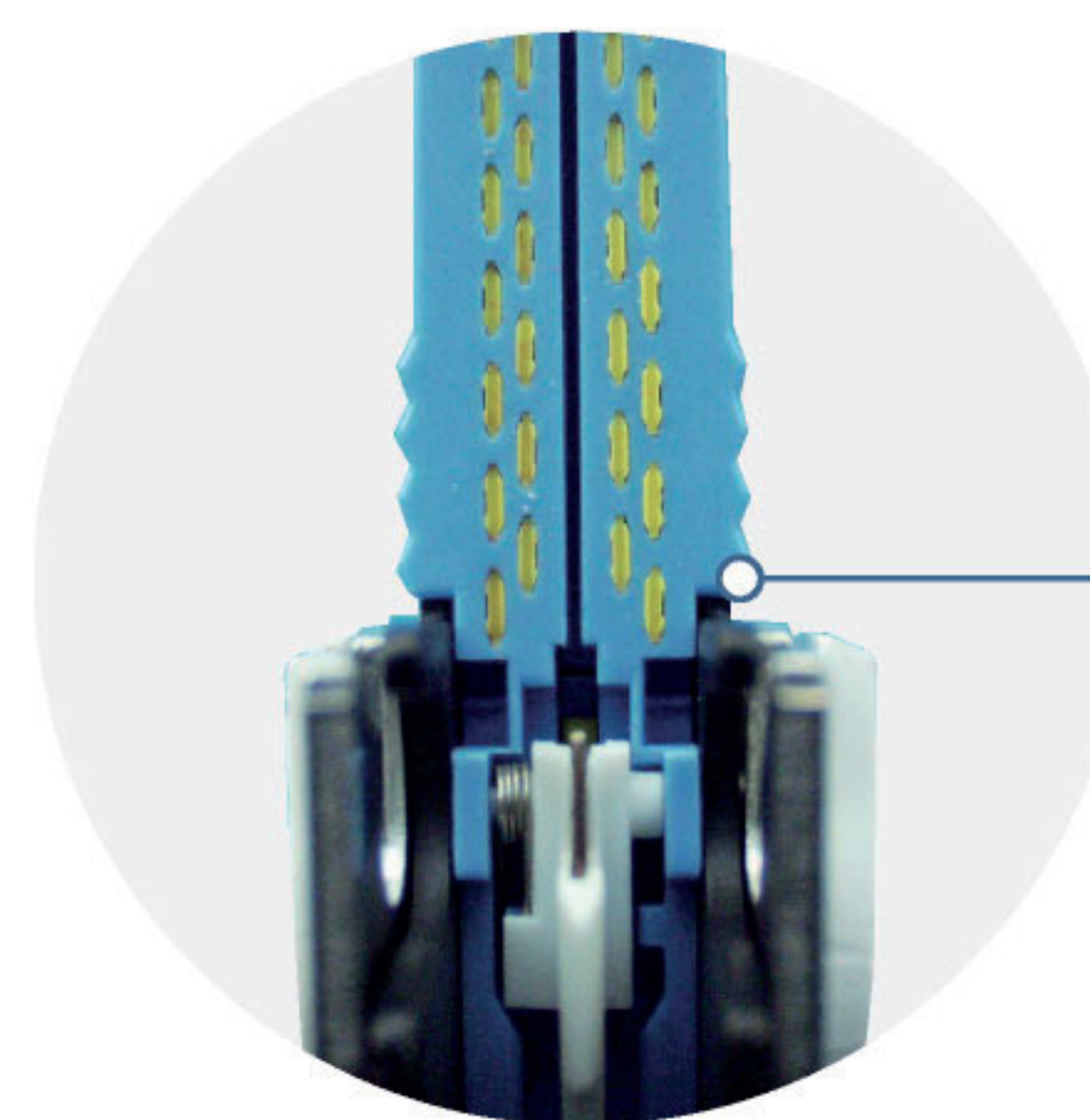




Otras marcas

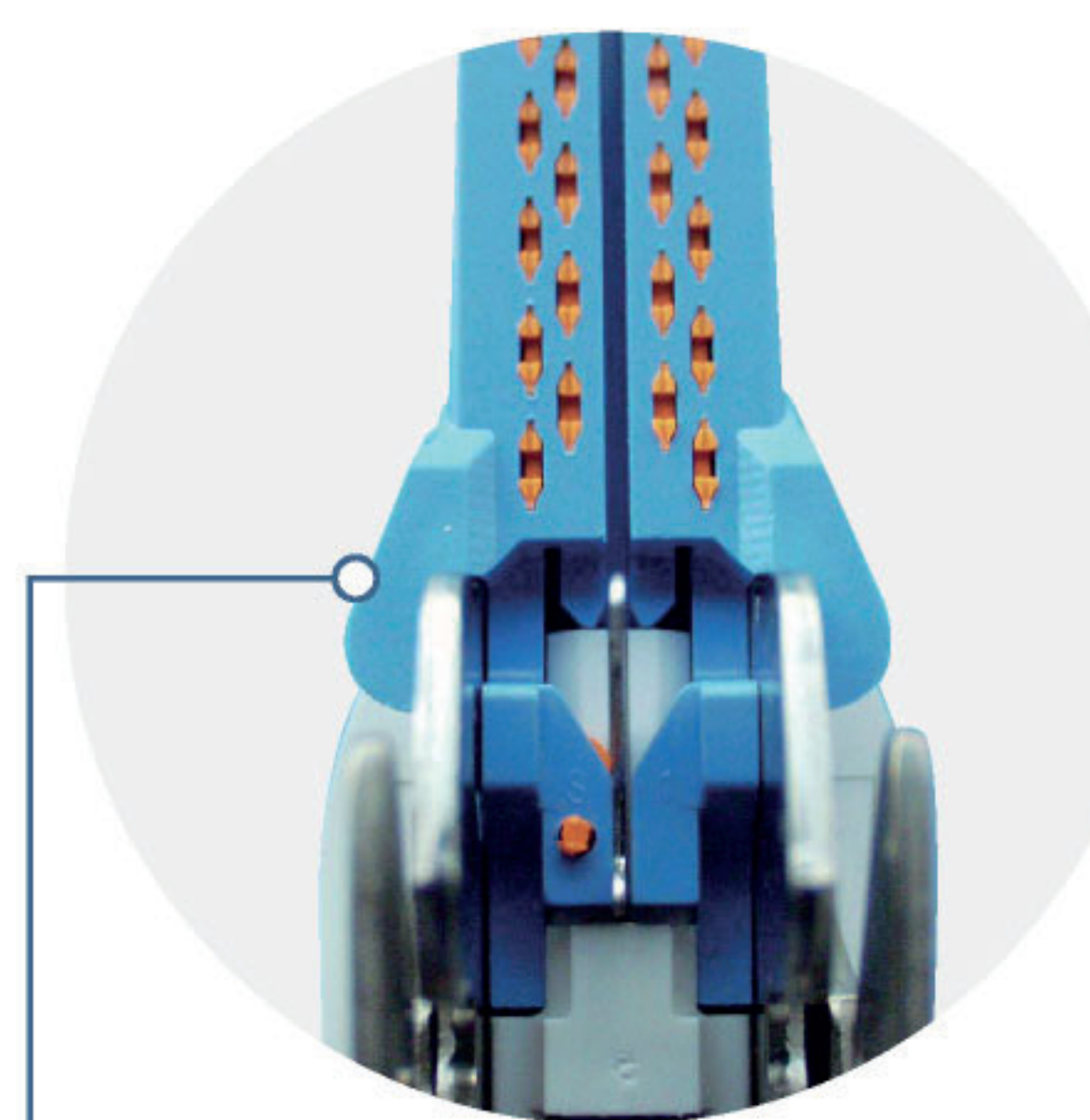

Posición final del tejido, asegura que el tejido se engrape de manera efectiva después del corte, haciéndolo más seguro

TECNOLOGÍA EG

El mejor agarre para los procedimientos más desafiantes

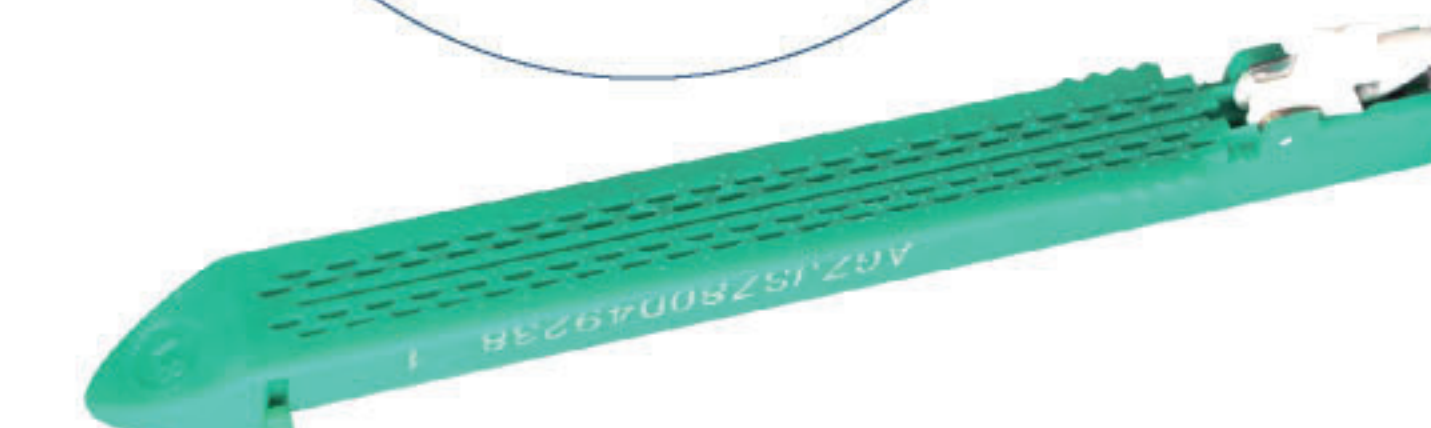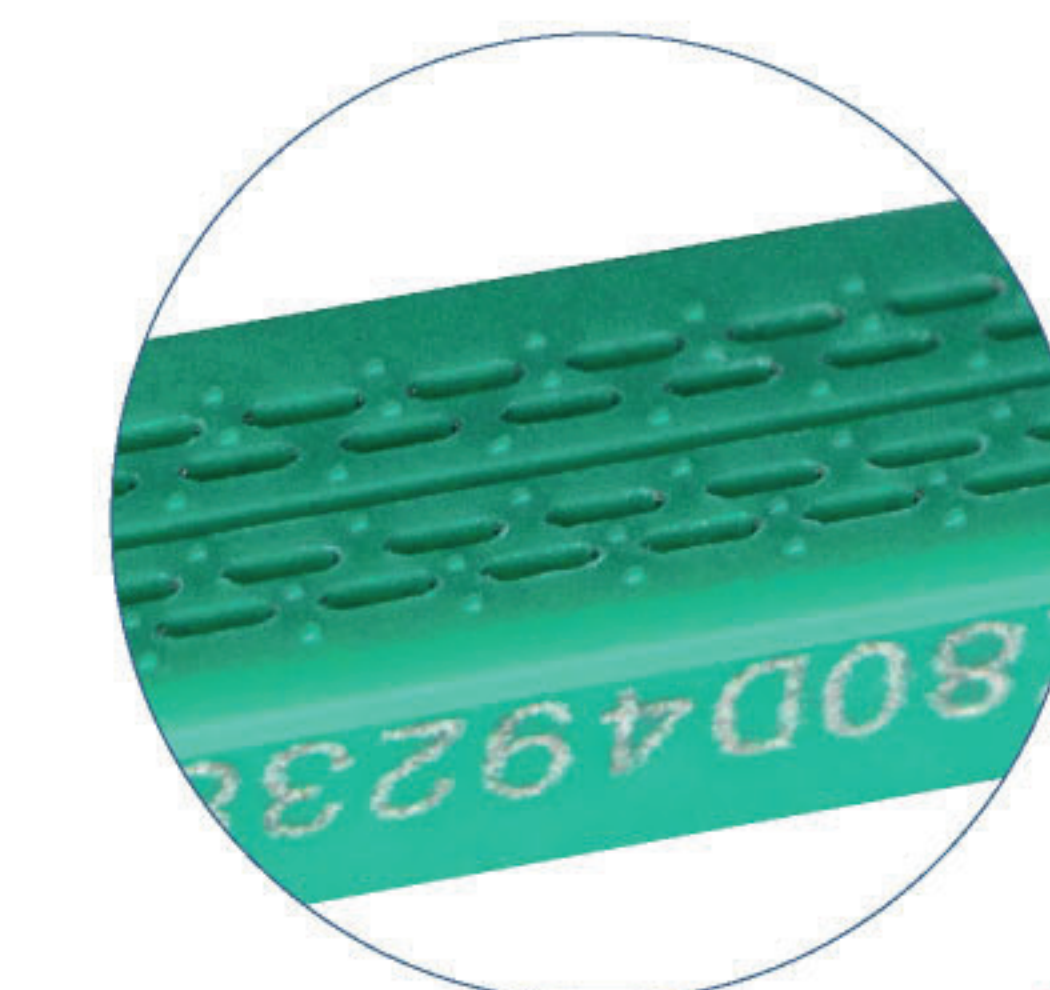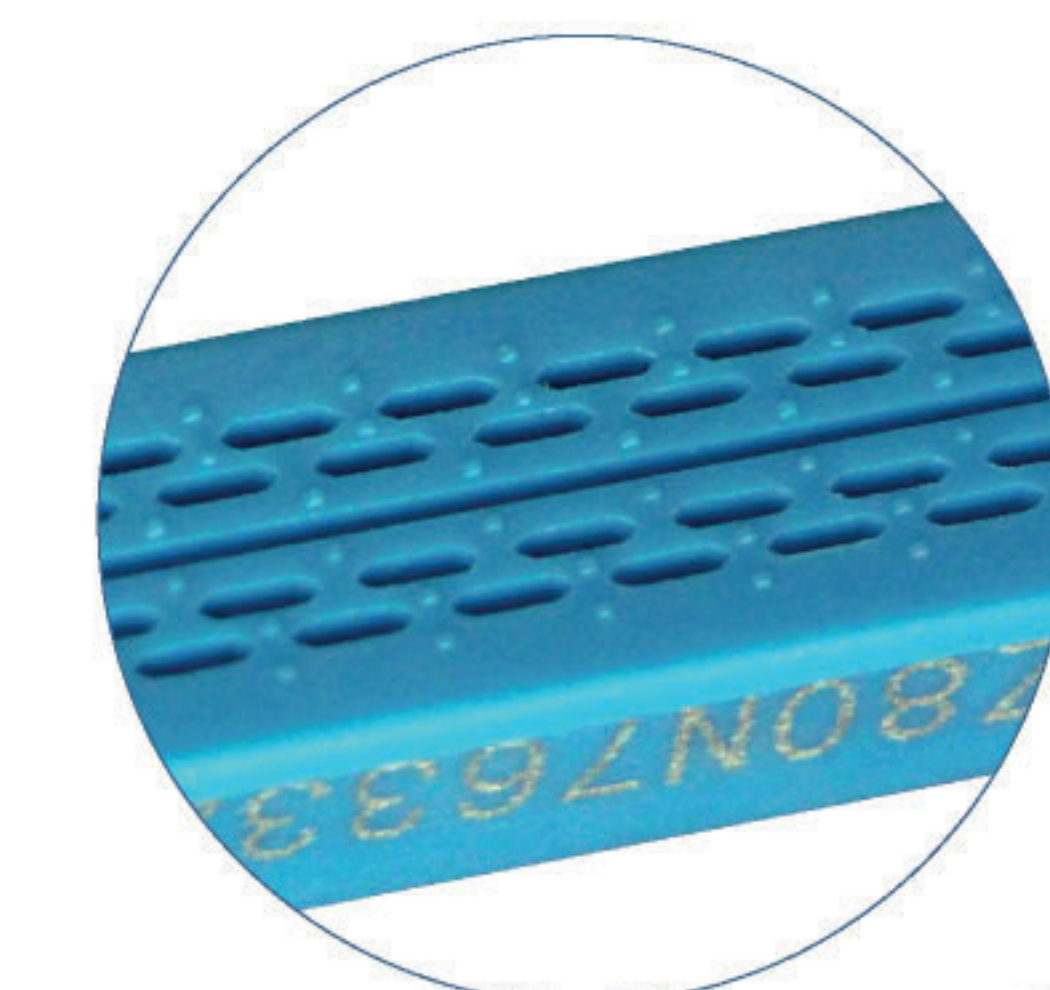

- Agarre Extra Atraumático
- Tejido eficazmente sostenido en las pinzas
- Fuerza de disparo reducida
- Línea de grapas uniformes y consistentes
- Menor deslizamiento con cada disparo
- Completo grapado y línea de transección
- Ahorro de costos